

Handleiding updaten qLabs ElectroMeter voor Apple iPhone v6

Zorgt u ervoor dat u uw inloggegevens van uw Apple ID bij de hand heeft, het kan zijn dat u die straks nodig heeft.

Stap 1: Schakel 'BLUETOOTH' in op uw iPhone. Ga naar instellingen. Druk op 'BLUETOOTH'. Schakel Bluetooth in.



U vindt de Instellingen app op uw iPhone scherm. Druk op dit icoon.



U drukt hier op Bluetooth.




Schakel Bluetooth in door op het schuifje achter Bluetooth te drukken, dit wordt groen als Bluetooth is aangezet.

Stap 2a: Download de juiste app via deze link

Klik op deze link of kopieer in uw webbrowser : <https://apps.apple.com/nl/app/qlabs-connect/id1359537456>

Werkt dit niet dan gaat u naar stap 2b.


De App Store opent, druk nu op het wolk icoon om de app te downloaden. Dit gebeurt automatisch. Open de app nog NIET. U dient eerst de stappen 4 t/m 7 te doorlopen op uw meetapparaat.

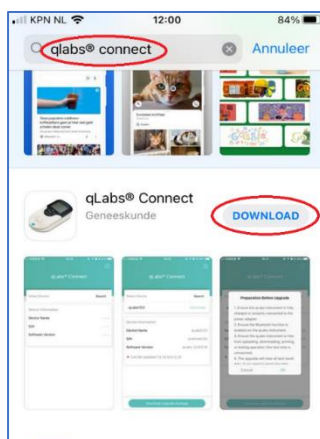

Stap 2b: Open de 'APPSTORE' op uw iPhone en druk op het zoekicoon (vergrootglas rechts onderin)




U vindt de App Store op uw iPhone startscherm(en) Druk op dit icoon.

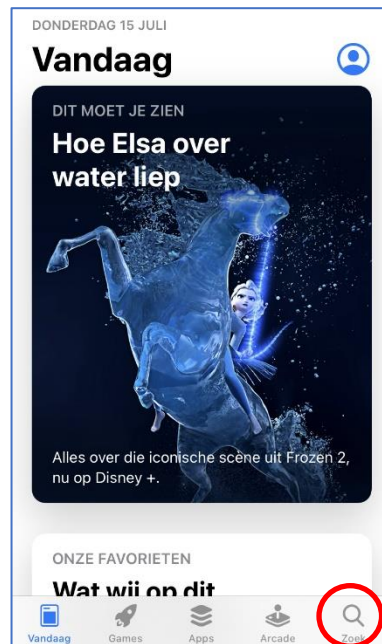


U zult een soortgelijk scherm tevoorschijn zien komen na het openen van de App Store

Stap 3: Zoek boven in de zoekbalk van de App Store naar 'QLABS CONNECT APP'. De app zal zoals op de afbeelding te zien is tevoorschijn komen. Selecteer op de app. Druk op 'DOWNLOAD' en voer de download uit. Open de app nog NIET. U dient eerst de stappen 4 t/m 7 te doorlopen op uw meetapparaat.

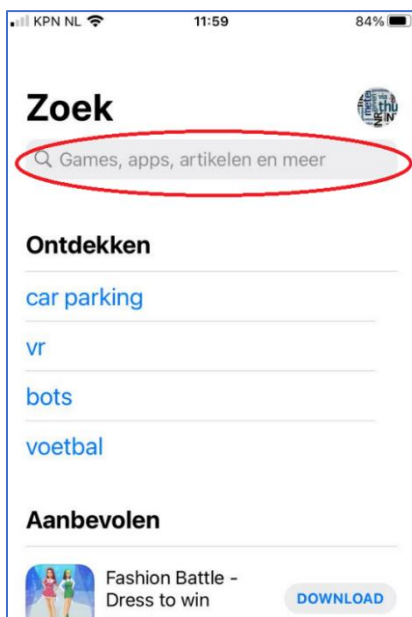

Hier ziet u de zoekbalk waar u qLabs Connect intypt.

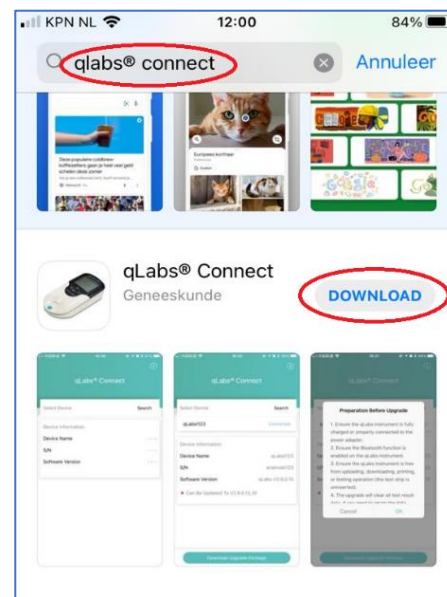

U ziet nu dit scherm. Klik nu op Download.

Stap 4: Schakel uw qLabs ElectroMeter in door op de **AAN/UIT** knop te drukken.



U houdt deze knop ingedrukt tot het apparaat aan gaat. U zult dit scherm dan zien op uw qLabs ElectroMeter.

Stap 5: Druk op de **linker pijltoets** om naar de instellingen te gaan. Navigeer vervolgens met de rechterpijltoets naar '**BLUETOOTH**' en druk op de '**OK**' toets op uw qLabs ElectroMeter.



Klik op de linker pijltoets om de instellingen te openen



Navigeer met de rechter pijltoets naar Bluetooth en druk op de 'OK' toets.

Stap 6: Zet de bluetooth 'AAN'. U doet dit door op de **rechter pijltoets** te drukken op uw meetapparaat. Druk vervolgens op de 'OK' toets op uw meetapparaat. U zult nu terugkeren naar de instellingen.



U zien dat Bluetooth UIT staat



Met de rechterpijltoets wijzigt u dit in AAN




Druk vervolgens op de OK toets

Stap 7: Druk op de **AAN/UIT** toets op uw qLabs ElectroMeter. U zult nu terugkeren naar het beginscherm.




U ziet hier de AAN/UIT toets. Druk erop en u zult terugkeren naar het beginscherm


Stap 8: Zoek en open de qLabs Connect app. Leg uw smartphone naast uw qLabs ElectroMeter en druk rechtsboven op **“ZOEKEN”**. U ziet nu de naam van uw qLabs ElectroMeter (qLabsXXXXXXX) in de app verschijnen.

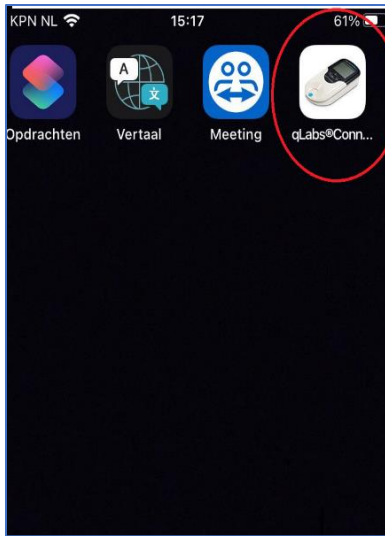

Dit is het icoon waar u op drukt om in de qLabs Connect app te komen

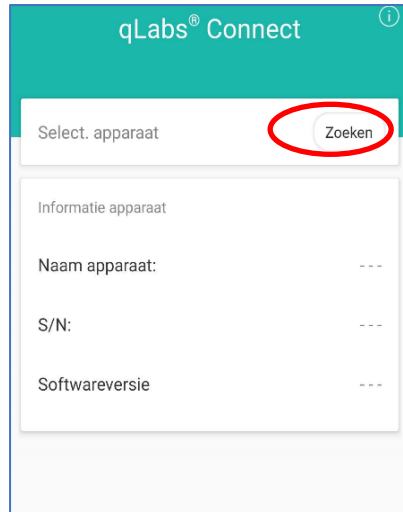

Als u de app opent ziet u dit scherm tevoorschijn komen

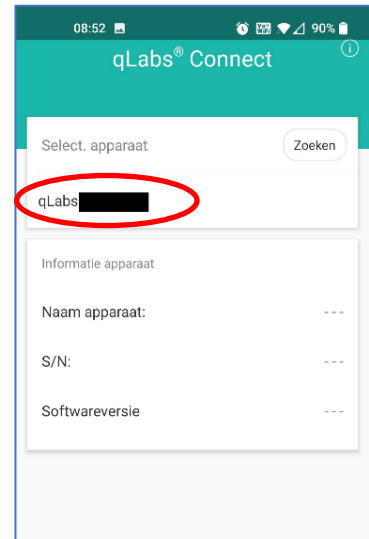


U klikt op zoeken, rechtsboven. U ziet nu uw qLabs naam tevoorschijn komen

Druk nu op de naam van uw qLabs ElectroMeter. U ziet ook de 7 laatste cijfers van het serienummer. U zult achter de naam van uw apparaat nu **‘VERBONDEN’** zien staan




U ziet hier de naam van uw qLabs ElectroMeter. U klikt op deze naam. Hierachter ziet u Verbonden staan

Druk onderin de qLabs Connect App op **‘UPGRADE PAKKET DOWNLOADEN’** U ziet nu een scherm tevoorschijn komen. Druk op **‘OK’** om door te gaan.

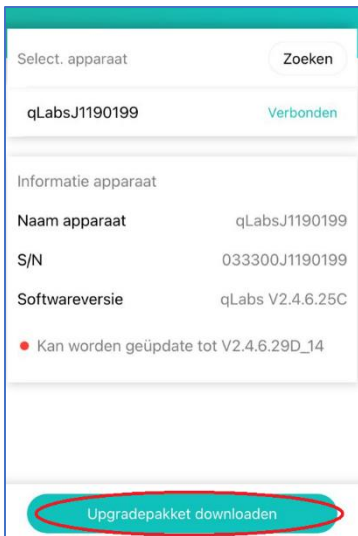

*U ziet hier Upgradepakket downloaden.
Hier klikt u op*

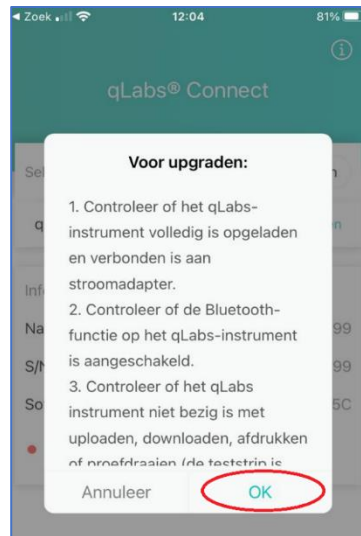

U klikt hier op OK, u kunt de meter ook gebruiken met batterijen


Stap 9: LET OP: goed op het scherm van het meetapparaat letten, de melding kan snel verdwijnen. Als de melding is verdwenen dan dient u stap 8 te herhalen. Uw qLabs ElectroMeter vraagt nu om de verbinding te bevestigen. Kies voor "JA" door op de "OK knop" te drukken. De update start nu automatisch, dit kan tussen de 6 en 13 minuten duren. Houd ondertussen uw smartphone naast uw qLabs ElectroMeter voor een goede verbinding.

Wacht tot de update is voltooid. Wanneer de update is voltooid ziet u onderstaande scherm in de app op uw smartphone. U kunt de app nu afsluiten.




U legt uw telefoon en de qLabs ElectroMeter op deze manier naast elkaar

U kiest voor JA, door op de "OK" toets te drukken

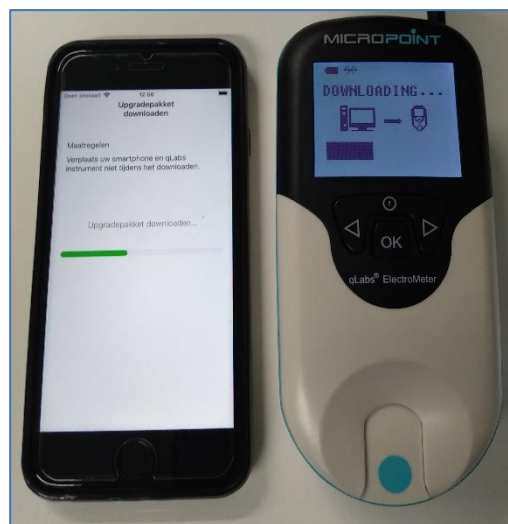


Bezigt met downloaden

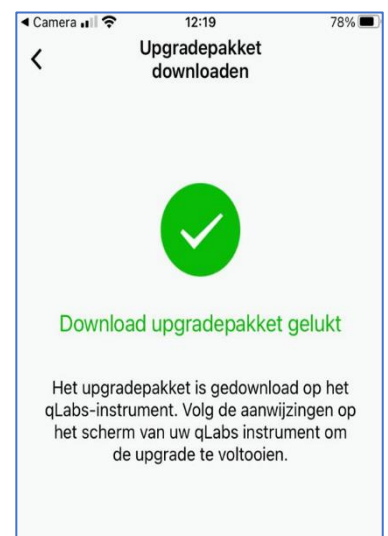

Download is voltooid

Stap 10: De update is uitgevoerd. U zult nu op uw qLabs ElectroMeter zien dat deze vraagt 'HERSTART NU VOOR AFMAKEN UPGRADE?' U dient nu 'JA' kiezen, dit doet u door op de 'OK' knop te drukken. **Let op: het scherm van het meetapparaat gaat nu kort uit en dan weer aan.** U zult nu 'UPGRADING' op uw qLabs ElectroMeter zien staan. Dit kan 3 tot 4 minuten duren. Blijf wachten tot het meetapparaat 100% aangeeft en de taalkeuze geeft.

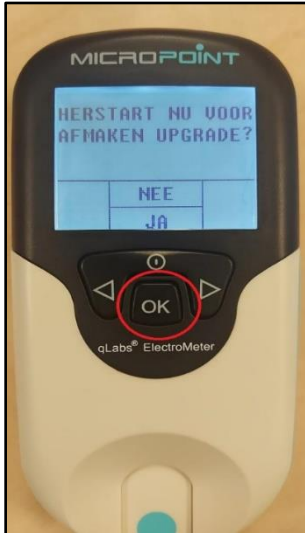

U moet nu JA selecteren, dit doet u door op de OK toets te drukken



U ziet hier het scherm van uw qLabs ElectroMeter. Deze geeft Upgrading aan.

Stap 11: Uw qLabs ElectroMeter gaat vragen om de taal in te stellen. Deze zal op 'ENGLISH' staan. Navigeer met de rechterpijltoets naar 'NEDERLANDS' en druk op de 'OK' toets op uw qLabs ElectroMeter. Het meetapparaat gaat nu naar het bekende startscherm



U navigeert met de rechter pijltoets naar Nederlands en drukt op de OK toets

Stap 12: Controleer of de update correct is verlopen door, als het meetapparaat aan staat, op de “OK-knop” te drukken, u moet nu **V2.4.6.29D** in beeld zien. **Is dit niet het geval dan moet u de stappen 4 t/m 11 nogmaals herhalen.**

Ziet u wel de juiste versie dan kunt u het apparaat weer uitschakelen door twee keer op de “Aan- en uit knop” te drukken.

Is dit niet het geval dan moet u de stappen nogmaals herhalen. Ziet u nog steeds niet de juiste versie dan dient u een belafspraak met ons in te plannen, zie onze website:

<https://denationaletrombosedienst.nl/update-qlabs/>



Scherm met juiste versie

Uw qLabs ElectroMeter is nu up to date en klaar voor verder gebruik.
Wanneer de update gelukt is dan horen wij graag van u. Stuur u ons dan even een bericht via uw dossier om ons op de hoogte te brengen? Dank u!